

# waterpik

## waterflosser

### Máy tăm nước Complete Care 5.0

Model: WP-861E2



#### QUI ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG:

Khi sử dụng các sản phẩm điện, đặc biệt khi có trẻ em, các thận trọng an toàn cơ bản dưới đây phải luôn được tuân theo:

#### HÃY ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

#### NGUY HIỂM:

##### Để giảm nguy cơ bị điện giật:

- Luôn tháo dây ra sau khi sử dụng.
- Không cầm phích cắm khi tay đang ướt.
- Không đặt sản phẩm vào nước hay các chất lỏng.
- Không sử dụng khi tắm.
- Không để nơi dễ rơi hay bị kéo vào bồn rửa.
- Không chạm vào sản phẩm bị rơi vào nước. Rút dây điện ra ngay lập tức.
- Kiểm tra dây cung cấp điện khi sử dụng lần đầu tiên và trong suốt quá trình sử dụng.

#### KHUYẾN CÁO:

##### Để giảm nguy cơ bị phỏng, điện giật, hỏa hoạn, bị thương:

- Không cắm sai hệ thống điện áp được ghi trên thiết bị hay đồ sạc.
- Phải tắt máy khi sạc pin, nếu không sẽ gây chai pin và vi phạm qui chế bảo hành.
- Không sử dụng thiết bị khi dây hay phích cắm bị hư hỏng, khi máy hoạt động không bình thường, khi máy bị rơi hoặc hỏng, hoặc bị rơi vào trong nước.
- Để tránh khả năng gây tổn thương do áp lực nước mạnh, không phun tia nước trực tiếp dưới lưỡi, vào trong tai, mũi, hoặc những nơi nhạy cảm khác. Xem hướng dẫn sử dụng để biết dùng đúng cách.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo chỉ định trong hướng dẫn hoặc theo đề nghị của các chuyên gia nha khoa.

- Chỉ sử dụng các đầu ống và các phụ kiện do hãng Water Pik, Inc. đề nghị.
- Chỉ sử dụng nước hoặc dung dịch chuyên dùng trong nha khoa theo chỉ định.
- Không làm rơi hoặc nhét bất kỳ vật lạ nào vào trong khe, ống.
- Không để dây điện gần nơi vật nóng.
- Không sử dụng nơi đang xịt tia oxygen hay aerosol.
- Không sử dụng nước súc miệng có chứa iodine, chất tẩy hoặc dầu cô đặc không hòa tan trong nước.
- Không sử dụng khi đeo bất kỳ loại nữ trang nào trong miệng. Hãy lấy ra trước khi sử dụng.
- Không sử dụng khi có vết thương hở trên lưỡi hay trong miệng.
- Nếu được thầy thuốc chỉ định uống kháng sinh hay thuốc để chuẩn bị trước một điều trị nha khoa, bạn nên hỏi nha sĩ trước khi sử dụng dụng cụ này hay bất kỳ một loại vệ sinh răng miệng nào khác.
- Chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.
- Hướng dẫn kỹ lưỡng trẻ em và các cá nhân khác có nhu cầu đặc biệt để biết cách sử dụng đúng cách.
- Đối với đầu làm sạch dưới nướu, không tháo đầu ống ra khỏi tay cầm trong suốt. Sau 3 tháng sử dụng, phải thay đầu tips mới. Đầu làm sạch dưới nướu không có sẵn trong tất cả các loại máy tăm nước.
- Không sử dụng sản phẩm quá 5 phút, chỉ sử dụng tiếp sau 2 giờ. Sử dụng lâu hơn có thể làm motor quá nóng, gây ra lỗi khi sử dụng và vi phạm qui chế bảo hành.
- Phải có người lớn giám sát khi trẻ sử dụng để chắc chắn trẻ không chơi nghịch với dụng cụ.

#### Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



**N.K. LUCK** VIỆT NAM  
CÔNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DỊCH PHẨM NGÀNH NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,

Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel **[028] 5412 2662 - 5412 2882**

waterpik®

waterflosser

Máy tăm nước Complete Care 5.0



Model: WP-861E2



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

### 1 SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

1. Đổ nước ấm vào bình nước và đặt nó chắc chắn lên trên thân máy.

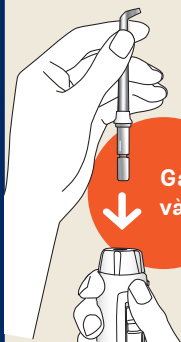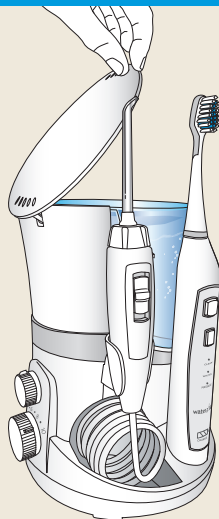

Gắn vào

2. Gắn đầu tít vào tay cầm đến khi nghe tiếng click.

3. Mở nút áp suất ở mức cao nhất, đặt đầu tít vào trong bồn, mở máy và mở nước ON cho đến khi hết nước trong bình. Tắt máy OFF.



Mở nước ON

### 2 KHỞI ĐỘNG MÁY

ĐỂ TRÁNH BỊ XÁO TRỘN:  
ĐẶT ĐẦU TÍT VÀO TRONG MIỆNG TRƯỚC KHI MỞ MÁY

Mở máy và mở nước ON. Bắt đầu ở áp suất thấp và tăng dần lên mức mong muốn.



### 3 CÚI NGƯỜI VỚI BỒN RỬA


Luôn luôn đặt tip bên trong miệng trước khi bật máy.

Đặt tip vào bên trong miệng, cúi thấp người xuống bồn nước. Khép môi đủ để ngăn không cho nước bắn ra, trong khi vẫn để cho nước chảy ra từ miệng xuống bồn.



### 4 KỸ THUẬT


Hướng đầu tít với răng tạo thành góc 90° ngay trên đường nướu.

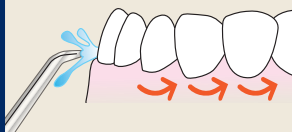

Bắt đầu với răng phía bên trong, di chuyển tip theo đường nướu, dừng lại trong một thời gian ngắn giữa kẽ răng.

Tiếp tục cho đến khi mọi điểm xung quanh và kẽ răng được làm sạch.

Tắt máy trước khi lấy đầu tít ra khỏi miệng.

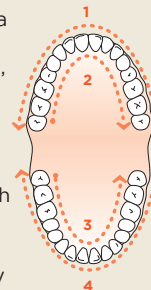

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



**N.K.LUCK** VIỆT NAM  
CÔNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH HẠ KHẨU

Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,

Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel (028) 5412 2662 - 5412 2882