

waterpik

# waterflosser

## Máy tăm nước gia đình - Classic

Model: WP-70E2



### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

#### 1 Chuẩn bị nước:



Lấy bình nước ra khỏi máy và cho nước hơi ấm vào.



Đặt bình nước trở lại bên trên thân máy, **ẤN BÌNH NƯỚC** sao cho gắn chặt vào thân máy.

#### 2 Gắn tip:




Chọn tip thích hợp và gắn vào tay cầm. **Ấn** cho đầu tip gắn thật chặt.

#### 3 Thay đổi áp suất:



Chỉnh áp suất ở cấp độ 1 cho lần đầu sử dụng. Tăng dần mức áp suất đến mức ưa thích.

#### 4 Tay cầm điều khiển:

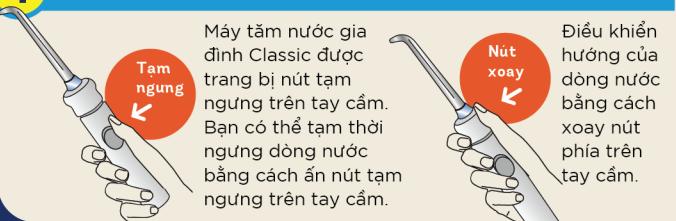

Máy tăm nước gia đình Classic được trang bị nút tạm ngưng trên tay cầm. Bạn có thể tạm thời ngưng dòng nước bằng cách ấn nút tạm ngưng trên tay cầm.

Điều khiển hướng của dòng nước bằng cách xoay nút phía trên tay cầm.

#### 5 Mở/Tắt máy:



Sau khi đã đặt tip vào bên trong miệng, **MỞ** máy bằng tay còn lại. Mím môi để tránh nước bắn ra.

**Tạm ngưng**

Luôn luôn ấn nút **TẠM NGUNG** hay **TẮT** máy trước khi rút tip ra khỏi miệng.

#### 6 Cách sử dụng để có kết quả tốt:

##### Luôn luôn đặt tip bên trong miệng trước khi bật máy.

Đặt tip vào bên trong miệng, cúi thấp người xuống bồn nước. Mím môi để nước khởi bắn ra, trong khi vẫn để nước chảy xuống bồn. **MỞ** máy.




#### 7 Cách sử dụng đầu ống:

Hướng đầu tip với răng tạo thành góc 90°.



Bắt đầu với răng phía bên trong, di chuyển tip theo đường nướu, dừng lại trong một thời gian ngắn giữa kẽ răng.

Tiếp tục cho đến khi mọi điểm xung quanh và kẽ răng được làm sạch.

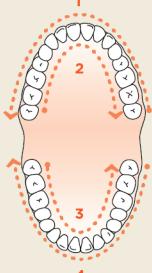

#### 8 Khi sử dụng xong:

**TẮT** máy, đổ phần nước còn lại đi và úp bình nước trở lại vào thân máy



**Đổ hết nước dư**

#### Thay tip:



Để thay tip, **Ấn** và giữ nút thay tip bên trên tay cầm vào kép tip ra.

**Chú ý:**  
Không ấn đầu tay cầm khi đang sử dụng

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



**N.K.LUCK** VIỆT NAM  
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,  
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Tel (028) 5412 2662 - 5412 2882



# waterflosser

## Máy tăm nước gia đình - Classic

Model: WP-70E2



### QUI ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG:

Khi sử dụng các sản phẩm điện, đặc biệt khi có trẻ em, các thận trọng an toàn cơ bản dưới đây phải luôn được tuân theo:

### HÃY ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

### NGUY HIỂM:

#### **Để giảm nguy cơ bị điện giật:**

- Luôn tháo dây ra sau khi sử dụng.
- Không cầm phích cắm khi tay đang ướt.
- Không đặt sản phẩm vào nước hay các chất lỏng.
- Không sử dụng khi tắm.
- Không để nơi dễ ròt hay bị kéo vào bồn rửa.
- Không chạm vào sản phẩm bị ròt vào nước. Rút dây điện ra ngay lập tức.
- Kiểm tra dây cung cấp điện khi sử dụng lần đầu tiên và trong suốt quá trình sử dụng.

### KHUYẾN CÁO:

#### **Để giảm nguy cơ bị phỏng, điện giật, hỏa hoạn, bị thương:**

- Không cầm sai hệ thống điện áp được ghi trên thiết bị hay đồ sạc.
- Phải tắt máy khi sạc pin, nếu không sẽ gây chai pin và vi phạm qui chế bảo hành.
- Không sử dụng thiết bị khi dây hay phích cắm bị hư hỏng, khi máy hoạt động không bình thường, khi máy bị ròt hoặc hỏng, hoặc bị rót vào trong nước.
- Để tránh khả năng gây tổn thương do áp lực nước mạnh, không phun tia nước trực tiếp dưới lưỡi, vào trong tai, mũi, hoặc những nơi nhạy cảm khác. Xem hướng dẫn sử dụng để biết dùng đúng cách.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo chỉ định trong hướng dẫn hoặc theo đề nghị của các chuyên gia nha khoa.

- Chỉ sử dụng các đầu ống và các phụ kiện do hãng Water Pik, Inc. đề nghị.
- Chỉ sử dụng nước hoặc dung dịch chuyên dùng trong nha khoa theo chỉ định.
- Không làm rót hoặc nhét bất kỳ vật lạ nào vào trong khe, ống.
- Không để dây điện gần nơi vật nóng.
- Không sử dụng nơi đang xịt tia oxygen hay aerosol.
- Không sử dụng nước súc miệng có chứa iodine, chất tẩy hoặc dầu cõi đặc không hòa tan trong nước.
- Không sử dụng khi đeo bất kỳ loại nữ trang nào trong miệng. Hãy lấy ra trước khi sử dụng.
- Không sử dụng khi có vết thương hở trên lưỡi hay trong miệng.
- Nếu được thầy thuốc chỉ định uống kháng sinh hay thuốc để chuẩn bị trước một điều trị nha khoa, bạn nên hỏi nha sĩ trước khi sử dụng dụng cụ này hay bất kỳ một loại vệ sinh răng miệng nào khác.
- Chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.
- Hướng dẫn kỹ lưỡng trẻ em và các cá nhân khác có nhu cầu đặc biệt để biết cách sử dụng đúng cách.
- Đối với đầu làm sạch dưới nướu, không tháo đầu ống ra khỏi tay cầm trong suốt. Sau 3 tháng sử dụng, phải thay đầu típ mới. Đầu làm sạch dưới nướu không có sẵn trong tất cả các loại máy tăm nước.
- Không sử dụng sản phẩm quá 5 phút, chỉ sử dụng tiếp sau 2 giờ. Sử dụng lâu hơn có thể làm motor quá nóng, gây ra lỗi khi sử dụng và vi phạm qui chế bảo hành.
- Phải có người lớn giám sát khi trẻ sử dụng để chắc chắn trẻ không chơi nghịch với dụng cụ.

#### **Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:**

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



Showroom - Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng:

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill,

Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel (028) 5412 2662 - 5412 2882