

#DungcuNhakhoa
#BokhoanNhakhoa
#ThietbiNhakhoa



VIỆT NAM
N.K.LUCK
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA



ĐỐI TÁC TRỌN ĐỜI CỦA PHÒNG KHÁM >>

Bộ khoan Nha khoa Siêu bền, thích hợp các ca điều trị



rc:series

BẢO HÀNH 12 THÁNG

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG BẢO TRÌ NHANH CHÓNG


SX TẠI **ÁO** 0297

Mạnh mẽ và bền bỉ

Tay khoan siêu tốc RC-98!

Tay khoan siêu tốc RC-98 ra đời trong dòng sản phẩm RC series của W&H. Cũng như dòng sản phẩm nổi tiếng có một tia phun sương RC-90 và RC-95, sản phẩm RC-98 mới mang đến khả năng làm việc chính xác với thiết kế tinh tế, chắc chắn cho tuổi thọ hoạt động lâu bền và hệ thống bạc đạn dễ dàng thay thế.

Hơn nữa, RC-98 mang đến khả năng gia tăng công suất mạnh mẽ nhờ vào hệ thống cánh quạt rotor mới mạnh mẽ của W&H, đầu tay khoan vệ sinh có bằng sáng chế, ba tia phun sương làm mát tối ưu cho mũi khoan và tất cả các vị trí điều trị.

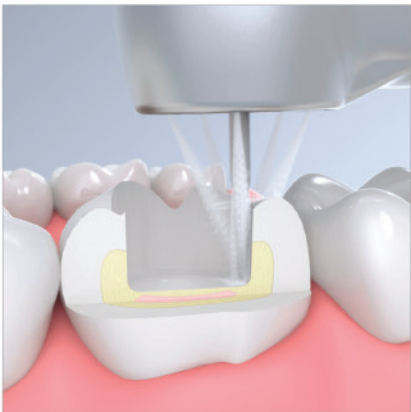

Làm mát tối ưu

Nhờ vào hệ thống phun sương nhiều tia, ngay cả khi một trong các tia bị cản bởi cấu trúc răng, đầu mũi khoan vẫn luôn được làm mát tối ưu và sạch sẽ.




Bộ lọc nước giúp cho phun nước làm mát hiệu quả

Tay khoan có bộ lọc nước có thể tháo ra làm vệ sinh dễ dàng: tránh tình trạng các cổng phun sương bị nghẹt và giúp các đường phun nước luôn được vệ sinh.

Đầu tay khoan vệ sinh chống hút ngược độc quyền sáng chế

Kết quả là giảm đi các chất bẩn đi vào bên trong đầu tay khoan, dòng khí luân chuyển bên trong đầu tay khoan đảm bảo không có các chất bẩn bị hút ngược vào bên trong, ngay cả khi rotor quay chậm lại.

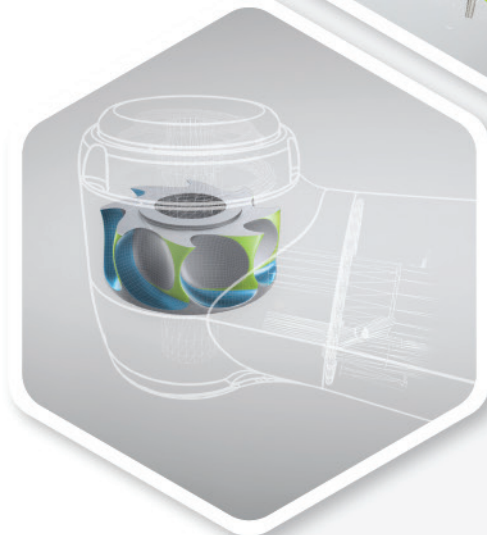

Cánh quạt rotor hoàn toàn mạnh mẽ

Thiết kế hình học của cánh quạt được tối ưu hóa cho lực quay rotor mạnh hơn. Điều này làm gia tăng lực mô-men xoắn và mang đến công suất tối ưu trong quá trình mài cắt.

3 tia phun sương

Làm mát tối ưu vùng điều trị và làm sạch đầu mũi khoan.

Đầu tay khoan nhỏ

Cho tầm nhìn tốt và khả năng tiếp cận vùng điều trị tối ưu nhờ vào thiết kế đầu tay khoan mới có kích thước nhỏ.

Hệ thống chuck bấm

Giúp cho việc thay mũi khoan dễ dàng, thoải mái và an toàn.

RC-98 từ W&H!

Một chiếc tay khoan mạnh mẽ cho ứng dụng hàng ngày của bạn.

Hệ thống làm mát hiệu quả với 3 tia phun sương và một bộ lọc vi lọc cho nước.

Độ cân bằng hoàn hảo

Tay khoan hoạt động êm ái, thiết kế tinh tế và trọng lượng nhẹ ngay trên tay của Bác sĩ giúp việc điều trị trở nên nhẹ nhàng và không gây mỏi tay.

Bộ lọc nước có thể thay thế

Bộ lọc nước ở đuôi tay khoan có thể tháo ra được và vệ sinh dễ dàng. Giúp cho tay khoan luôn được vệ sinh và vận hành hiệu quả hơn.



RC-98

SN
01001CE
0297

2019.02

E 30384 CE
MS

rc:series

BẢO HÀNH 12 THÁNG

GIAO HÀNG
MIỄN PHÍ

PHỤ TÙNG
CHÍNH HÃNG

BẢO TRÌ
NHANH CHÓNG

SX TẠI **ÁO**  

Tay khoan siêu tốc
Chuck bấm
RC-95 BC/RM



Tay khoan siêu tốc
Chuck vặn
RC-90 BC/RM

- » 1 tia phun sương » Công suất hoạt động 11W » Độ ồn thấp, hoạt động êm ái «
- » Tuổi thọ lâu bền » Bảo hành 12 tháng «



SMARTREPAIR



Bộ bạc đạn thay thế

Bạn có thể tự thay bộ bạc đạn giúp tiết kiệm thời gian.

Sức mạnh bên trong

Dòng sản phẩm RC Series không chỉ có tay khoan siêu tốc mà còn có thêm dòng tay khoan chậm thẳng và khuỷu chất lượng cao. Các tay khoan này mang đến giá trị chất lượng xuất sắc cũng như hiệu suất làm việc tối ưu và có thể dễ dàng chuyển qua sử dụng có nước với bộ kẹp phun nước bên ngoài RC-E tùy chọn.

Tay khoan khuỷu tốc độ chậm

Chuck gạt RC-58

Tay khoan khuỷu RC-58 ngắn và nhẹ. Với ưu điểm cho tầm nhìn tốt và thao tác thoải mái, tay khoan giúp cho bạn làm việc không bị mỏi tay trong các ca điều trị dài. Có thể sử dụng được tất cả các mũi khoan contra-angle có đường kính 2,35 mm.

Tay khoan thẳng tốc độ chậm

Chuck gạt RC-43

Với hình dáng thon gọn, tay khoan đảm bảo làm việc hoàn hảo. Cũng như tay khoan siêu tốc và tay khoan khuỷu, tay khoan thẳng RC-43 có được hệ thống ngàm giữ mũi khoan chắc chắn và linh hoạt.



Air motor RC-20 BC/RM

Với trọng lượng nhẹ, air motor RC-20 mang đến công suất làm việc cao và hiệu quả. Air motor RC-20 cũng có sẵn lựa chọn có thêm bộ kẹp phun nước bên ngoài theo mong muốn.



Bộ kẹp phun nước bên ngoài RC-E

Bộ kẹp phun nước bên ngoài RC-E là một phụ kiện dễ dàng kết nối và kinh tế để chuyển đổi tay khoan chậm RC sang sử dụng có nước.



Thông số kỹ thuật

SX TẠI
ÁO



BẢO HÀNH 12 THÁNG

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG BẢO TRÌ NHANH CHÓNG

Loại:	Tay khoan siêu tốc RC-98 BC/RM	Tay khoan siêu tốc RC-95 BC/RM	Tay khoan siêu tốc RC-90 BC/RM
Chuôi kết nối (ISO 9168):	2 lỗ / 4 lỗ	2 lỗ / 4 lỗ	2 lỗ / 4 lỗ
Mũi khoan FG, với chuẩn EN ISO 1791-1:	Ø 1,6 mm	Ø 1,6 mm	Ø 1,6 mm
Tốc độ quay tối đa:	330.000 vòng/phút	330.000 vòng/phút	330.000 vòng/phút
Hệ thống ngàm:	Chuck bấm	Chuck bấm	Chuck vặn
Đầu tay khoan vệ sinh:	Có	Có	Có
Công suất:	≥16 W	≥11 W	≥11 W
Tia phun sương:	3 tia	1 tia	1 tia
Đường kính đầu tay khoan:	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm

Loại:	Tay khoan khuỷu RC-58	Tay khoan thẳng RC-43
Tỉ lệ truyền:	1:1	1:1
Chuẩn kết nối motor:	ISO 3964	ISO 3964
Mũi khoan với chuẩn EN ISO 1797-1:	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm
Tốc độ quay tối đa:	25.000 vòng/phút	25.000 vòng/phút

Loại:	Air motor RC-20 BC/RM
Chuôi kết nối (ISO 9168):	2 lỗ / 4 lỗ
Chuẩn kết nối motor:	ISO 3964
Tốc độ quay ở 2,2 bar – 3bar:	20.000 – 25.000 vòng/phút
Moment quay:	4 Ncm
Công suất tối đa:	20 W

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC



VIỆT NAM
N.K.LUCK
www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill,
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

