

GHẾ NHA KHOA

KY-826

Niềm tin chuyên nghiệp
Giá trị vượt trội



TÍNH NĂNG VẬN HÀNH THÔNG MINH

1

ĐIỀU CHỈNH THÔNG MINH

Hỗ trợ cài đặt sẵn các vị trí điều trị, giúp nha sĩ thao tác dễ dàng hơn và bệnh nhân ngồi dậy thuận tiện



2

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG ÊM ÁI (SILENT DRIVE SYSTEM)

Loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn cơ học, giúp nha sĩ tập trung vào từng chi tiết trong quá trình điều trị.



3

CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH LINH HOẠT (OPERATIONAL MODES)

Cho phép chọn các chế độ vận hành khác nhau phù hợp với thói quen sử dụng của từng nha sĩ, nâng cao hiệu quả làm việc.



CHI TIẾT HỆ THỐNG

ĐÈN LED LÀM VIỆC

Cần đèn ba trục (Three-axis Steering)

Thiết kế đồng bộ tối ưu kết hợp độ chính xác vận hành cao, dễ dàng xoay chuyển đa hướng.



Đèn LED đơn sắc

Nhiệt độ màu 4.500K cung cấp ánh sáng tối ưu, dịu nhẹ cho việc sử dụng lâu dài, bảo vệ mắt nha sĩ.

Dải độ rọi điều chỉnh vô cấp bằng cảm ứng chạm (8.000 – 40.000 Lux), hỗ trợ cả chế độ thủ công và cảm ứng.

Chức năng liên động (Interlocking Function)

Tự động tắt đèn khi bệnh nhân ngồi dậy và tự động bật đèn khi bệnh nhân nằm xuống, giúp vận hành thuận tiện hơn



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

- Chức năng khóa nén khí (Airlock):** Khóa cố định vị trí mâm dụng cụ, giúp mâm vững chãi trong suốt quá trình điều trị.
- Bề mặt có thể khử trùng:** dễ vệ sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn phòng khám.
- Thiết kế bảng chức năng trực quan:** nâng cao thao tác chính xác, giảm nguy cơ nhầm lẫn.
- Cụm giá gác tay khoan điều chỉnh đa góc độ:** Cho phép xoay lật linh hoạt, giúp nha sĩ thao tác lấy và gác dụng cụ thuận tiện nhất theo thói quen.



BỒN NHỎ

- Bồn nhỏ dạng phễu sâu:** thiết kế đặc biệt ngăn bắn tóe nước khi bệnh nhân súc miệng.
- Hệ thống cấp nước tự động cảm biến hồng ngoại:** thân thiện với người dùng, kích hoạt không cần chạm tay.
- Trình tự xả và cấp nước thông minh:** đảm bảo bồn nhỏ luôn sạch sẽ trong suốt quá trình sử dụng.



CÔNG THÁI HỌC VÀ SỰ THOẢI MÁI



Tay vịn xoay 90°

Thiết kế với cơ chế chốt gài nhanh, đảm bảo tiếp cận không bị cản trở ở cả vị trí điều trị hàm trên và hàm dưới.



Tựa đầu điều chỉnh

Đáp ứng nhu cầu của các vóc dáng bệnh nhân khác nhau, cung cấp vị trí điều trị tối ưu cho nha sĩ.



Đế ghế siêu mỏng

Thiết kế để thấp giúp tối ưu, tạo khoảng trống để chân tối đa cho nha sĩ thao tác sát vùng điều trị.




Bàn đạp đa chức năng

- Bật/tắt đèn khám điều trị
- Nâng hạ / nghiêng ghế nha khoa
- Kích hoạt chế độ súc miệng
- Tái định vị ghế – đảm bảo vận hành liền mạch, không cần chạm tay.

NỆM DA THỦ CÔNG CAO CẤP

Nệm da thủ công khâu tay dành riêng cho ghế nha khoa – Sự kết hợp của sự thoải mái và độ bền trong nghệ thuật.

- **Vừa vặn chính xác:** Đường may được tùy chỉnh riêng, vừa vặn hoàn hảo theo đường cong của ghế, đảm bảo sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân.
- **Độ bền vượt trội:** Mút (foam) mật độ cao kết hợp với da nhập khẩu chuẩn y tế, chịu rách, giữ màu tốt, tuổi thọ gấp ba lần so với sản phẩm thông thường.
- **Thủ công tinh xảo:** Viên khâu tay chính xác, đường may đôi gia cố cạnh dài, thiết kế chống vênh ngăn biến dạng chỉ.
- **Da PU/PVC chuẩn y tế:** Dễ khử trùng, kháng khuẩn, phù hợp tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn phòng khám nha khoa.
- **Mút đàn hồi cao (High-rebound Foam):** Phân phối áp lực đều, ngăn xẹp lún khi bệnh nhân nằm lâu trong quá trình điều trị.

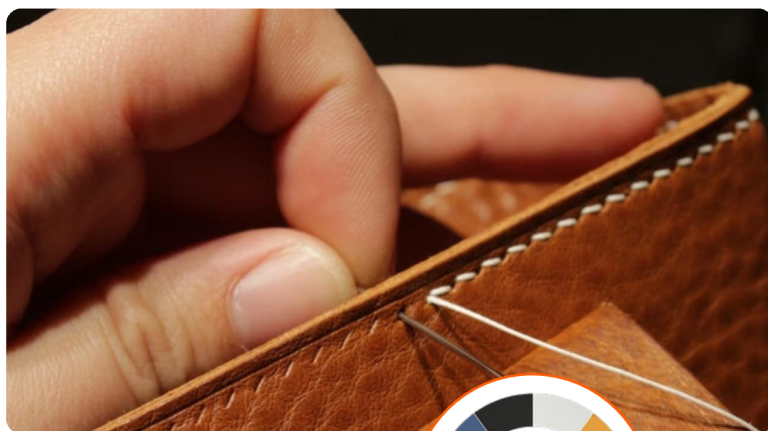

Bảng màu da có sẵn



Lưu ý

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để có thông tin mới nhất.
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với hình ảnh.



CÔNG TY TNHH TMDV N.K.MAY MẮN

📍 781/A13 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

☎ +84 28.38620090

🌐 <https://nkluck.vn>

